

Powering the Unit

1. Press **DOWN ARROW**↓ to turn unit **ON**.
2. The test will default to the last protocol selected.
3. Press and hold **UP ARROW**↑ to turn unit **OFF**.

Placing the Probe

1. Make sure ear canal is clear of debris.
 2. Select a colored silicone eartip and place on probe tube, fully seating it on the probe.
- 
3. Insert probe in the ear. Probe should remain in place without hand-holding.

Changing the Probe Tube

NOTE: Probe tubes do NOT have to be changed for every test, but may need to be replaced if clogged.

1. To remove probe tube, flip eartip up and use to grip tube.







2. Twist slightly and pull tube straight out of probe head.
3. Insert a new probe tube into the probe head until it is fully seated.



Conducting a Test

1. Press **↓CHANGE** to select a different protocol.
2. Press **←CHANGE→** to scroll to desired protocol.
3. Press **UP ARROW**↑ to return to test screen.
4. Press **←L** or **R→** to select test ear and begin test.
5. Probe Check will appear on screen. The scale should be in the green area. If the scale is in the amber area, reposition the probe in the ear.
6. Test will automatically start once probe check is acceptable.
7. When test is finished, Press **←L** or **R→** to test the other ear, or press **↓REVIEW** to review results graph.

NOTE: “Pass” or “Refer” will only be displayed if set in protocol.

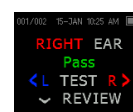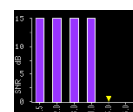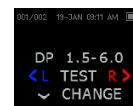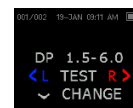

Printing Test Results

NOTE: The ERO•SCAN device has multiple printing options. Setup is required based on the printing method selected.

Option 1: MAICO Sessions

1. Please see the **Operation Manual** for setup instructions.
2. Enter demographics within Patient Information fields.
3. Establish the connection between the ERO•SCAN and the MAICO Sessions software.
4. Once the connection is established the test results are transferred automatically.
5. Select  for direct printout or  for print to PDF.

Option 2: ERO•SCAN Wireless Thermal Printer (optional accessory)

1. Once the test is completed, turn on the printer.
2. Press **UP ARROW**↑ until the printing screen is displayed on the device.
3. Press one arrow next to **←CONNECT→**, for results to be transferred and printing to start.



Option 3: OtoAccess® Database (optional software)

1. Please see the **Instructions for Use** for setup instructions.
2. Select patient from database and enter the MAICO Sessions module.
3. Establish the connection between the ERO•SCAN and the MAICO Sessions software.
4. Once the connection is established the test results are transferred automatically.
5. Select  to save,  for direct printout or  to print to PDF.

Cómo encender la unidad

1. Oprima la **FLECHA HACIA ABAJO** ↓ para encender la unidad.
2. La prueba se realizará de acuerdo con el último protocolo seleccionado.
3. Oprima y mantenga oprimida la **FLECHA HACIA ARRIBA** ↑ para apagar la unidad.

Colocación de la sonda

1. Asegúrese de que el conducto auditivo esté libre de suciedad.
2. Seleccione una punta auricular de silicona de color y colóquela en el tubo de sonda, de manera que quede completamente asentada en la sonda.



3. Inserte la sonda en el oído. La sonda debe permanecer en su lugar sin tener que sostenerla con la mano.

Cambio del tubo de sonda

NOTA: Los tubos de sonda NO tienen que cambiarse para cada prueba, pero es posible que haya que reemplazarlos si se obstruyen.


1. Para sacar el tubo de sonda, voltee la punta auricular hacia arriba y úsela para agarrar el tubo.
2. Tuerza ligeramente y tire del tubo directamente hacia afuera de la cabeza de la sonda.
3. Inserte un tubo de sonda nuevo en la cabeza de la sonda hasta que quede completamente asentado.



Cómo realizar una prueba

1. Oprima **↓CAMBIAR** para seleccionar un protocolo diferente.
2. Oprima **←CAMBIAR→** para desplazarse al protocolo deseado.
3. Oprima la **FLECHA HACIA ARRIBA** ↑ para regresar a la pantalla de prueba.
4. Oprima **←I** o **D→** (izquierdo o derecho) para seleccionar el oído que se va a examinar y comenzar la prueba.
5. Comprobación de la sonda aparecerá en la pantalla. La escala debe estar en el área verde. Si la escala está en el área ámbar, reposicione la sonda en el oído.
6. La prueba comenzará automáticamente una vez que la verificación de la sonda sea aceptable.
7. Cuando la prueba termine, oprima **←I** o **D→** para examinar el otro oído, u oprima **↓REVISAR** para revisar la gráfica de resultados.

NOTA: “Aprobado” o “Remitir” solo se mostrará si se establece en el protocolo.

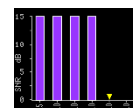

Cómo imprimir los resultados de la prueba

NOTA: El dispositivo ERO•SCAN tiene varias opciones para imprimir. Se requiere preparación según el método de impresión seleccionado.

Opción 1: MAICO Sessions

1. Consulte las instrucciones de preparación en el **Manual de operación**.
2. Introduzca datos demográficos en los campos de Información del paciente.
3. Establezca la conexión entre el ERO•SCAN y el software MAICO Sessions.
4. Una vez establecida la conexión, los resultados de la prueba se transfieren automáticamente.
5. Seleccione  para impresión directa o  para imprimir en PDF.

Opción 2: Impresora Térmica Inalámbrica (accesorio opcional) del ERO•SCAN

1. Cuando se complete la prueba, encienda la impresora.
2. Oprima la **FLECHA HACIA ARRIBA** ↑ hasta que la pantalla de impresión aparezca en el dispositivo.
3. Oprima una flecha junto a **←CONECTAR→** para que los resultados se transfieran y la impresión comience.



Opción 3: OtoAccess® Database (software opcional)

1. Consulte las instrucciones de preparación en el **Manual de instrucciones**.
2. Seleccione el paciente de la base de datos e ingrese al módulo MAICO Sessions.
3. Establezca la conexión entre el ERO•SCAN y el software MAICO Sessions.
4. Una vez establecida la conexión, los resultados de la prueba se transfieren automáticamente.
5. Seleccione  para guardar,  para impresión directa o  para imprimir en PDF.