

## 1 À PROPOS DE CE GUIDE RAPIDE



Ce guide rapide n'a pas pour vocation de remplacer le manuel d'utilisation. Il est obligatoire de lire la totalité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil !  
Certaines des fonctions suivantes peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques choisis.

## 2 PRÉPARATION AU TEST

**Une pièce silencieuse est idéale pour le dépistage auditif.**

- ✓ Fermez la porte pour exclure le bruit extérieur.
- ✓ Demandez aux personnes présentes de se taire.
- ✓ Coupez le son des téléviseurs, radios etc.
- ✓ Éloignez-vous des sources de bruit acoustique (climatiseurs, bébés qui pleurent).

**Des interférences électromagnétiques peuvent causer des problèmes pendant la mesure PEA**

- ✓ Éteignez les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs et les écrans qui se trouvent à proximité.
- ✓ Soyez attentifs aux sources d'interférences électriques et évitez-les si possible.

**Est-ce le bon moment ?**

- ✓ Plus vous attendez pour effectuer le dépister un nouveau-né, plus il y aura de chances d'obtenir un résultat Réussite. Évitez de tester dans les 12 heures qui suivent la naissance.
- ✓ Le dépistage est le plus efficace lorsque le bébé vient d'être nourri et qu'il dort confortablement.
- ✓ La peau doit être propre et exempte de lotion, de crème ou d'huile de bain.

**Préparez le bébé**



- ✓ Massez une goutte de gel de la taille d'un petit pois 10 à 15 fois sur la peau à chacun des 3 sites d'électrodes.
- ✓ L'électrode de la mastoïd est placée sous l'oreille, l'électrode de masse au-dessus de l'oreille et l'électrode vertex est placée sur le front à la racine des cheveux.
- ✓ Veillez à ce que les zones de gel restent séparées les unes des autres. Vous pouvez vous en assurer en massant le gel en lignes parallèles sur les trois sites.

**Appliquez le gel sur les électrodes**

- ✓ Déposez une petite goutte du gel d'électrode sur chacune des électrodes du BERAprone®.

**Placez le BERAprone®**



- ✓ Positionnez d'abord l'électrode de la mastoïd sous l'oreille. Puis abaissez les deux autres électrodes en place en veillant à obtenir un bon contact avec les sites cutanés préparés.
- ✓ En fonction de la taille de la tête du bébé, la position de l'électrode vertex du BERAprone® peut être ajustée en tournant l'électrode.
- ✓ Veillez à ce que le coussin du BERAprone® entoure l'oreille et touche la peau sur toute sa circonférence, sans qu'il y ait d'espace entre la peau et le coussin.
- ✓ Ne pas appliquer de pression sur le BERAprone® sur la tête du bébé. Soutenez-le uniquement pour maintenir la position des électrodes sur la peau préparée.

## 3 COMMENCER LE DÉPISTAGE



### Ajouter un patient

- ✓ Créez un **NOUVEAU PATIENT** ou sélectionnez un patient dans la **LISTE DES PATIENTS** ou la **LISTE DU JOUR**.

### Le patient est-il prêt ?


- ✓ Attendez que le patient soit apaisé et calme avant de commencer le test.

### Commencer le dépistage

- ✓ Appuyez sur **ENREGISTRER ET CONTINUER** ou **CONTINUER** pour lancer la sélection.
- ✓ Sélectionnez **OREILLE GAUCHE** ou **OREILLE DROITE**.
- ✓ Appuyez sur **DÉMARRER LE TEST** pour lancer la sélection.

## 4 PROCESSUS DE DÉPISTAGE

### Vérification d'impédance

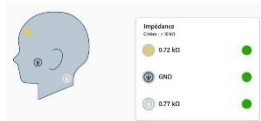

- ✓ Le contact des électrodes avec la peau (impédance) est vérifié.
- ✓ L'état de chaque électrode est indiqué par les couleurs :
  - **Vert** = bonne impédance
  - **Orange** = critères d'impédance non respectés
- ✓ Si des cercles sont jaunes, vous devez améliorer l'impédance.
  - Vérifier que l'électrode est en contact avec la peau à l'endroit préparé et appuyer à nouveau sur toute la surface de l'électrode.
  - Retirer l'électrode et préparer à nouveau la peau à cet endroit ; réappliquer l'électrode ou en utiliser une nouvelle électrode si nécessaire.

Lorsque l'impédance est acceptable pour toutes les électrodes, le test démarre automatiquement.


### Mesure PEA



- ✓ Pendant le test, un diagramme de mesure est affiché avec une ou plusieurs lignes de progression :
  - **Rouge** = oreille droite, **bleu** = oreille gauche.
  - **Ligne verte** en haut du diagramme = Critère de réussite
  - La durée du test est affichée horizontalement de 0 s à 180 s.
- ✓ Des artefacts se produisent en cas d'interférences électromagnétiques ou de forte activité :
  - **Barre de bruit** = Orange
  - Interrompez le test pour calmer le bébé et assurer de bonnes conditions de test.
- ✓ Résultats possibles du test :
  - **RÉUSSITE** = Le critère de réussite a été atteint pendant la durée du test.
  - **À REFAIRE** = Le critère de réussite n'a pas été atteint pendant la durée du test.
  - **INCOMPLETE** = le test a été interrompu ; selon les paramètres, il peut être nécessaire de sélectionner un motif d'interruption.
- ✓ **Temps de test réduit (option)** : une case s'affiche dans le diagramme. La mesure se termine après 120 s, si la ligne de test n'a pas atteint plus de 60 %.

## 5 OPTIONS APRÈS TEST

### Impression

- ✓ Appuyez sur  et sélectionnez les mesures à imprimer directement à partir du logiciel MB 11.
- ✓ Il est également possible d'imprimer à partir d'un logiciel connecté après le transfert.

### Exportation manuelle du suivi (uniquement avec MAICO Center)

- ✓ Si le suivi automatique est activé dans les paramètres, aucune autre action n'est nécessaire.

Appuyez sur  et **Suivi manuel** pour ouvrir l'écran **Exporter le test**.