

1 O TEJTO STRUČNEJ PRÍRUČKE



Táto stručná príručka nemá nahradiť návod na obsluhu. Prečítanie celého návodu na obsluhu pred použitím zariadenia je povinné!
Niektoré z nasledujúcich funkcií sa môžu líšiť podľa jednotlivých nastavení.

2 ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA

- ✓ **Zapnutie:** Stlačením **tlačidla napájania** na prednej strane zariadenia touchTymp MI 24 zariadenie zapnete.
- ✓ **Vypnutie:** Stlačením **tlačidla napájania** sa tiež vypne.




3 OVLÁDANIE OBRAZOVKY

Vysvetlenie ikon na stavovom riadku, paneli s nástrojmi a pevnom funkčnom paneli.

Stavový riadok			Stav pripojenia k PC: je zvýraznený zelenou farbou, ak je touchTymp pripojený k PC a je spustená relácia MAICO.
Panel s nástrojmi	Testovacia obrazovka		Vymazať: vymazanie aktuálne nameraných údajov.
			Edit: upraviť výsledky reflexu. Výberom tlačidla vstúpite na obrazovku úpravy reflexu.
			Prenos do PC: prenos aktuálne nameraných údajov, ak bol v nastaveniach zvolený manuálny prenos. Pri manuálnom prenose údajov sa údaje vymažú.
			Tlač: vytlačenie výsledkov všetkých dokončených testov a všetkých tónov sondy.
			Ucho: výber ucha na testovanie alebo opakovanie merania na tom istom uchu (červená = pravé ucho, modrá = ľavé ucho).
			Spustenie, zastavenie, pozastavenie: spustenie, zastavenie alebo pozastavenie merania.
	Obrazovka nastavenia		Predvolené nastavenie: nastavenie podsystémov späť na výrobné nastavenia.
			Uložiť: na uloženie nastavení.
Opravené Funkčný panel			Domov: na výber testovacieho modulu.
			Tympanometria: otvorenie modulu Tympanometria.
			Tympanometria a akustický reflex: otvorenie modulu Tympanometria a akustický reflex.
			Nastavenia: prístup k zoznamu všetkých nastavení zariadenia.

4 VYBERTE POLOŽKU MERANIE

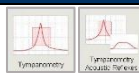

Do testovacej obrazovky môžete vstúpiť z **domovskej** obrazovky alebo stlačením tlačidiel na pevnom paneli funkcií: **Tympanometria** a **Tympanometria a akustické reflexy** .

5 INDIKÁCIA STAVU TESTU

PROBE	ZARIADENIE DO 08/2024	ZARIADENIE OD 08/2024	INFORMÁCIE
	-	Status Ready	Vyberie sa pravé alebo ľavé ucho. Sonda je mimo ucha.
	Status Ready	-	Je vybrané pravé ucho. Sonda je mimo ucha.
	Status Ready	-	Vybrané je ľavé ucho. Sonda je mimo ucha.
	Status In Ear Status Testing Status Done		Sonda je v uchu a tesní, test prebieha alebo test je hotovo.
	Status Blocking Status Leaking		Sonda je v uchu a je zablokovaná alebo netesná.
Žiadne svetlo	Status Unknown Status No Probe		Sonda nie je správne pripojená alebo sa nevydáva tón sondy.


6 VYKONANIE A VYHODNOTENIE TYMPANOMETRICKÉHO TESTU A AKUSTICKÉHO REFLEXNÉHO TESTU

Pred každým testom akustického reflexu sa vykoná tympanometrické meranie, aby sa zistil maximálny tlak poddajnosti pre lepší výkon.

Tympanometrický test



Tympanometria a akustický reflexný test

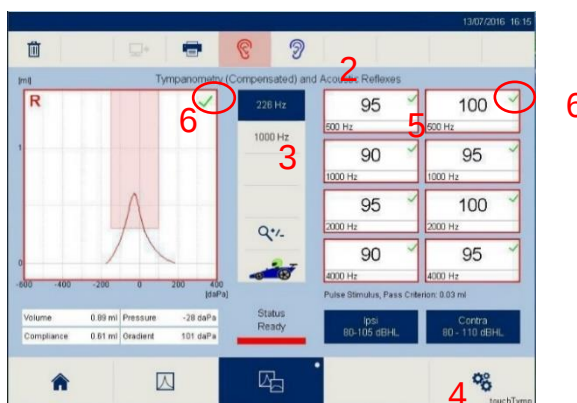

Výber testovacieho ucha

- ✓ Stlačte príslušný tympanogram (1), ušné tlačidlá (2) alebo tlačidlo na **sonde** (červené = pravé ucho, modré = ľavé ucho).

Výber frekvencie testovania

- ✓ Tympanometrický test: stlačte príslušné tlačidlo (3).
- ✓ Akustický reflexný test: stlačte tlačidlá **Ipsi** a **Contra** (4), ako aj tlačidlá rôznych **frekvencií** (5), aby ste v prípade potreby zmeny upravili predvolený akustický reflexný stimul. Červený/modrý rámček okolo stimulu znamená, že sa bude prezentovať.

Začať testovanie

- ✓ Meranie sa spustí hneď, ako sa sonda správne umiestni do ucha na automatické testovanie. Stlačte tlačidlo **štartu** alebo tlačidlo **sondy** pre manuálnu voľbu.

Výsledky

- ✓ Výsledky (6) sú prezentované v grafickom alebo tabuľkovom zobrazení Tympanogram a/alebo výsledky testu akustického reflexu. *Kritériá výsledkov sú založené na nastaveniach.*

✓	Prejsť
✗	Žiadna reakcia

7 SPRÁVA VÝSLEDKOV TESTOV

- ✓ **Vymazať**  : vymazanie výsledkov testov.
- ✓ **Tlač**  : na priamu tlač výsledkov. Pri tlači zo zariadenia sa vytlačia všetky výsledky testov naraz (t. j. 226 Hz a 1000 Hz).

Dalšie informácie vám poskytne váš miestny distribútor alebo spoločnosť MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlín, Nemecko
Tel.: +49 30 70 71 46-50 - Fax: +49 30 70 71 46-99 - E-mail: sales@maico.biz - Internet: www.maico.biz