

1 O TOMTO STRUČNÉM PRŮVODCI




Tento stručný návod nenahrazuje návod k obsluze. Přečtení celého návodu k obsluze před zahájením provozu zařízení je povinné!
Některé z následujících funkcí se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení.

2 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

- ✓ K zapnutí a vypnutí zařízení použijte vypínač na zadní straně zařízení.
- ✓ Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej vypněte, abyste zabránili vypálení obrazovky.

3 PŘEHLED KLÍČŮ A IKON

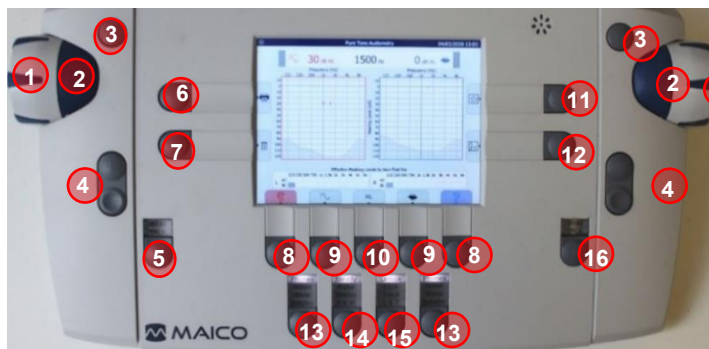

Funkční klávesy 6 až 12 mají dvě možnosti volby. Pokud je vedle ikony zobrazena šipka (např. ▲, ►), je po dlouhém stisknutí k dispozici nabídka výběru.

- **Krátké stisknutí** (krátce stiskněte) → Přímý výběr
- **Dlouhé stisknutí** (stiskněte 2 s) → Otevře nabídku výběru

Např:



	Tónová zkouška		Levé/pravé ucho/ binaurální		Mikrofon		Tisk (termální tiskárna)
	Test řeči		Tón/šumový signál pro děti		Pomocná 1/2		Vytisknout PDF
	Speciální testovací menu		Maskování šumu		Vlna 1/2		Odstranit
	Nabídka nastavení		Návrat na		Seznam řečových testů		Odstranit jednotlivé
	Uložit do / otevřít databáze		Uložit		Editovat pacienta		Zobrazit relaci

4 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE

Chcete-li přejít na obrazovku **Tone Test**, zvolte klávesu **12**. Návod k obsluze **tónového testu**:

Úkol	#	Akce	Stisknutí	Výběr
Parametry testu	8	Změna uší (levý/pravý kanál)	Krátké	
	1	Vybraná úroveň (dB HL)		Ovládací kolečko
	4	Zvolte frekvenci (Hz)		+ zvýšení Hz / - snížení Hz
	13	Výběr snímače		Telefony/internetové telefony/fon/reproduktor
	14	Výběr testovacího signálu		Stálý/pulsní/kolísavý/P & W
	10	Vyberte typ testu		HL/MCL/UCL/HL
	9	Změna typu signálu (levý/pravý kanál)	Krátké	
Prezentace signálu	2	Režim přednášejícího: přítomnost signálu		Tlačítko , signál se zapne stisknutím
	2	Režim přerušení: signál přerušení		Tlačítko , signál se vypne stisknutím
Uložení jednotlivých výsledků	3	Uložit výsledek	Krátké	Tlačítko S
	3	Uložit Bez odezvy	Dlouhé	Tlačítko S
Pokročilá testovací funkce	8	Rychlé přepínání pro individuální volbu Ear pro každý kanál	Dlouhé	
	9	Rychlé přepínání pro individuální volbu Signál pro každý kanál	Dlouhé	
Správa dat	7	Odstranění relace	Krátké	
	7	Odstranění jednoho bodu	Dlouhé	
		Tisk na termální tiskárně	Krátké	
	6	Uložit jako PDF	Dlouhé	
		Uložit do / otevřít databáze	Krátké	

5 ŘEČOVÁ AUDIOMETRIE

Chcete-li přejít na obrazovku **testu řeči**, vyberte klávesu  **12**. Řečové materiály lze prezentovat pomocí mikrofonu, externího pomocného vstupu nebo interních vlnových souborů. Výchozí výběr lze provést v nastavení.

Obsluha dalších tlačítek pro testování řeči zahrnuje:

Úkol	#	Akce	Stisknutí	Výběr
Parametry testu	9	Změna typu signálu (levý/pravý kanál)	Krátké	výchozí vstup / 
		Rychlé přepínání pro individuální volbu Signál pro každý kanál	Dlouhé	 //   / 
	10	Vyberte typ testu		SRT/WRS/MCL/UCL/SRT / WRS 
	5/16	Zapnutí kanálu pro prezentaci pacientovi	Krátké	Tlačítko STIM
	4	SRT: prochází slovem pro výběr WRS: předložené slovo s výsledky		+ další položka /- předchozí položka + správné /- nesprávné

POZNÁMKA:

-  a  vyžaduje aktivaci podnětu pomocí tlačítka **STIM 5** nebo **16**, aby se začal prezentovat.
- Vstupní kalibraci  a  lze dokončit pomocí tlačítka **STIM/Monitor 7**.

Klíč pro testování vlnových souborů:

Úkol	#	Akce	Stisknutí	Výběr
Parametry testu	12	Výběr seznamu řečových testů	Krátké	
	2	Přehrát soubor s vlnou: SRT/SRT  : každá položka se přehrává samostatně. WRS/WRS  : Pokračování přehrávání po získání bodů		Tlačítko 

6 SPECIÁLNÍ TESTOVACÍ AUDIOMETRIE

Chcete-li vstoupit do **nabídky speciálních testů** , zvolte klávesu  **11**.

- ✓ Zobrazí se nabídka pro výběr speciálního testu, např. **vysokofrekvenční audiometrie** (volitelná licence), **Stengerův test čistých tónů** nebo **SISI test** (volitelná licence). Seznam speciálních testů, které lze vybrat, závisí na zakoupených licencích.
- ✓ Po výběru se zobrazí speciální testovací obrazovka

7 OBECNÉ FUNKCE

Úkol	#	Akce	Stisknutí	Výběr
Výběr	1	Výběr zvýraznění		Ovládací kolečko
	2	Potvrzení výběru nabídky		Tlačítko 
Komunikace	5	Mluvte dopředu a mluvte zpět	Dlouhé	Tlačítko STIM/Talk
	16	Kalibrace monitoru a vstupů	Dlouhé	Tlačítko STIM/Monitor
Nastavení	11	Vstup do nabídky nastavení	Dlouhé	 → 
	6	Přímý přechod na obrazovku Tone Test		
	7	Přímý přechod na obrazovku Test řeči		
	11	Návrat na předchozí obrazovku		