

1 OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING



Deze beknopte handleiding beschrijft het gebruik van het apparaat met de NSDSK-software. Hierin wordt het volgende uitgelegd:


- ✓ Inloggen als screener
- ✓ Patiëntselectie
- ✓ NSDSK-specifieke velden en navigatie

Deze handleiding vervangt niet de volledige gebruiksaanwijzing en is alleen van toepassing wanneer het apparaat wordt gebruikt met gegevens die via de NSDSK-software worden gesynchroniseerd. De NSDSK-software maakt verbinding met het centrale CANG-gehoorscreeningsysteem en draagt gegevens over van en naar het apparaat.

Voor een veilig en efficiënt gebruik van het apparaat is het essentieel om alle veiligheids- en waarschuwingsinstructies en de richtlijnen voor installatie en bediening in de handleiding op te volgen!

2 INLOGGEN

- ✓ De lijst met gebruikers wordt via de NSDSK-software naar het apparaat overgebracht.
- ✓ Selecteer de screener uit de screenerlijst (zoekfunctie beschikbaar).
- ✓ Voer het persoonlijke wachtwoord in.
- ✓ Gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen niet op het apparaat worden aangemaakt. Ze worden beheerd en overgedragen via de NSDSK-software.

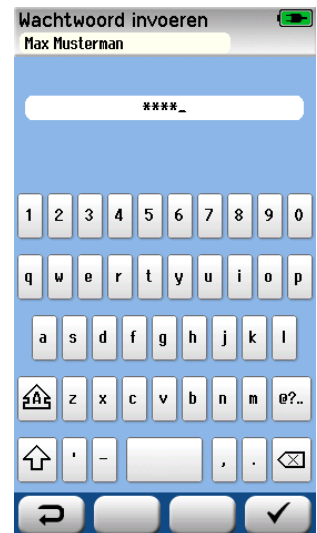

3 EEN PATIËNT SELECTEREN VOOR SCREENING

Patiënten geïmporteerd vanuit NSDSK-software

Wanneer patiëntgegevens worden overgedragen via NSDSK-software:

- ✓ Druk op **Patiënt selecteren** in het **hoofdmenu**. Selecteer een patiënt.
- ✓ De demografische gegevens van de patiënt zijn alleen-lezen. Dit zorgt voor een correcte identificatie en consistentie met het NSDSK-systeem.


De screener kan:

- ✓ Een screeninglocatie selecteren (verplicht).
- ✓ Opmerkingen toevoegen.

Handmatig toegevoegde patiënten

Als een patiënt niet in de lijst **Patiënt selecteren** voorkomt:

- ✓ Druk op **Nieuwe patiënt** om de patiëntgegevens in te voeren op het scherm **Details invoeren**.
- ✓ **Bewerkbare velden**: alle patiëntvelden behalve **Info coördinator**.

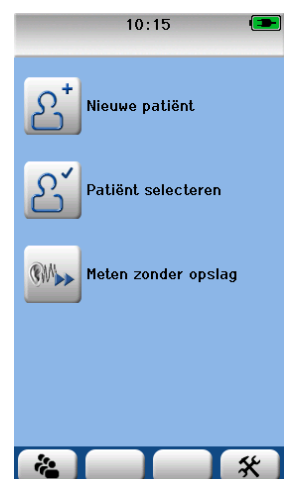

4 METEN ZONDER OP TE SLAAN

Met **'Meten zonder opslag'** kunt u metingen uitvoeren zonder gegevens op te slaan:

- ✓ Er worden geen patiëntgegevens en geen testresultaten op het apparaat opgeslagen.
- ✓ Er worden geen gegevens overgedragen via de NSDSK-software.



Gebruik **'Meten zonder opslag'** alleen voor:

- ✓ Training
- ✓ Apparaatcontrole
- ✓ Demonstratiedoeleinden

Gebruik **'Meten zonder op te slaan'** NIET voor officiële screenings!

5 OPMERKINGEN


COMMENTAAR VAN PATIËNTEN (VÓÓR SCREENING)

Druk op:

- ✓ **Commentaar (vrije tekst)** en voer maximaal 24 tekens in. Druk op '✓' om op te slaan.
- ✓ **Commentaar (lijst)** en selecteer een vooraf gedefinieerde opmerking.

Belangrijk:

- ✓ Opmerkingen van patiënten kunnen alleen worden ingevoerd VOORDAT een test wordt uitgevoerd.
- ✓ Patiëntenvelden en opmerkingen kunnen alleen worden bewerkt TOTDAT een test is opgeslagen.

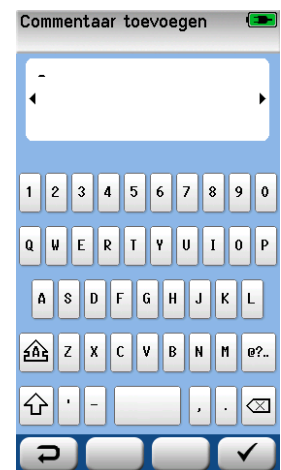

Wanneer wordt een test opgeslagen?

Een test wordt als opgeslagen beschouwd wanneer:

- ✓ De meting wordt gestopt na de impedantiecontrole, of
- ✓ De screening wordt afgesloten met een resultaat.

6 DE OAE-PROBESPITS REINIGEN – STANDAARD OAE-PROBE




1. Draai de sondedop los door deze tegen de klok in te draaien.
2. Haal de plastic sondetip uit de sonde.
3. Gebruik de reinigungsset uit de doos met oordopjes: Haal het reinigungs gereedschap uit elkaar om het dunne borsteltje en het dunne, stijve plastic koordje te vinden.
4. Gebruik het plastic koordje of het borsteltje om vuil uit de sondetip te verwijderen. Steek de sondetip altijd vanaf de achterkant in om ophoping van vuil in de ventilatieopeningen te voorkomen.

Reinig de sonde zelf NIET met de reinigingsmiddelen!

Reinig de sondetip NIET terwijl de tip nog bevestigd is!

Dit beschadigt de sonde.

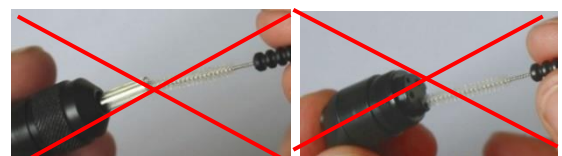

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur of MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin. Duitsland - Tel.: +49 30 70 71 46-50 • E-mail: sales@maico.biz • Internet: www.maico-diagnostics.com