

MA 1

Aparato de tamizaje superligero

El MA 1 es la solución más pequeña de MAICO para un tamizaje auditivo rápido. Su diseño elegante y su manejo intuitivo hacen que las pruebas sean rápidas y cómodas. El MA 1 está siempre a mano, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Características generales

- Aparato de mano para tamizaje por conducción aérea
- Fácil manejo con una sola mano
- Excepcionalmente ligero
- Frecuencias de prueba: 500, 1000, 2000 y 4000 Hz
- Señales de tono puro de 15 dB HL a 50 dB HL
- Funciona con baterías (2 baterías AA)
- Apagado automático
- Audífonos de CA DD45
- Audífonos de CA atenuantes del ruido DD65 v2 opcionales



Aplicaciones

Diseñado para pediatras, tamizaje auditivo infantil y distribuidores de audioprótesis, el MA 1 es un fiable dispositivo de tamizaje portátil que permite realizar evaluaciones auditivas rápidas y precisas. Su diseño ligero y portátil simplifica las pruebas diarias en cualquier entorno, lo que favorece la detección precoz y el cuidado eficaz de la audición.

Pequeño y manejable

Con su diseño superligero el MA 1 es suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano. El MA 1 es nuestro aparato de tamizaje auditivo por conducción aérea más ligero y manejable. Tanto frecuencias como intensidades pueden ser ajustadas con una sola mano.

Ideal para tamizajes rápidos

El aparato es capaz de liberar una señal de tono puro a un oído a la vez. El nivel de estimulación es de entre 15 dB HL y 50 dB HL en pasos de 5 dB. Las frecuencias de prueba tienen un rango de 500 a 4000 Hz. La unidad está equipada con audífonos DD45.

Si el MA 1 se utiliza en un entorno ruidoso, se recomienda elegir los audífonos opcionales de CA atenuantes del ruido DD65 v2.

Duración de batería prolongada

El MA 1 funciona con dos baterías alcalinas AA. La unidad se apaga cuando queda inactiva y se vuelve a encender presionando cualquiera de los 7 botones.


MA1 – Componentes y accesorios



Dispositivo portátil
MA1



Audífonos de CA
DD45

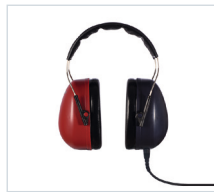

Audífonos de CA
DD65 v2



Estuche de trans-
porte



Bloc para audio-
gramas

Los componentes y accesorios varían según la región y la configuración.



Vea nuestro video
de capacitación
sobre MA1

Más información de producto sobre otras soluciones de MAICO

easyTone



Audiometría con tablet
rápida y sencilla

ERO•SCAN



Dispositivo EOA portátil
fácil de usar



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Alemania
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



09/2025