



MA 25 / MA 27

Screening-Audiometer kompakt & tragbar

MAICO-Hörscreening-Audiometer für unterwegs!

Die Audiometer MA 25 und MA 27 wurden für zuverlässige mobile Hörscreenings, ohne Kompromisse bei der Leistung, entwickelt. Das ultraleichte MA 25 passt in Ihre Handfläche und bietet eine vollständige Palette an Tests, während das robuste MA 27 über einen integrierten Griff und einen eingebauten Stauraum für Zubehör verfügt. Beide sind robust genug für wechselnde Einsatzorte — einsatzbereit, wo immer Ihre Patienten Sie brauchen.

Die Luftleitungs-Screening-Audiometer MA 25 und MA 27 sind seit über 45 Jahren bewährte Geräte im MAICO-Sortiment. Vor kurzem wurden diese bewährten Modelle sorgfältig überarbeitet, um den sich wandelnden Anforderungen der heutigen Anwender im Bereich der Hörgesundheit gerecht zu werden — mit derselben Zuverlässigkeit, aber mit aktualisierten Funktionen und moderner Leistung. Diese neue Generation ist bereit, wie immer genaue und zuverlässige Ergebnisse zu liefern.

MA 25 auf einen Blick

- Luftleitungs-Audiometer
- 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz
- Testsignale von -10 dB HL bis 100 dB HL
- Reintöne und Warble-Töne (gepulst oder kontinuierlich)
- Tragbar und leicht, nur 980 g
- Verwendung mit 3 AA-Batterien, Netzteil oder USB-Kabel zum PC
- Optionale Version MA 25e mit automatisiertem Hughson-Westlake-Test, Talk-Forward und MAICO Sessions PC-Software



MA 27 auf einen Blick


- Luftleitungs-Audiometer
- 11 Frequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz
- Testsignale von -10 dB HL bis 100 dB HL
- Reintöne und Warble-Töne (gepulst oder kontinuierlich)
- Kompakt und tragbar mit integriertem Griff
- Integriertes Fach zur Aufbewahrung von Zubehör
- Stromversorgung über Netzteil oder USB-Kabel zum PC
- Optionale Version MA 27e mit automatisiertem Hughson-Westlake-Test, Talk-Forward und MAICO Sessions PC-Software



Gegründet, um Hörscreenings zu vereinfachen

MAICO Diagnostics wurde 1937 von Leland A. Watson gegründet, um dem wachsenden Bedarf der Ärzte an einem zuverlässigen, wissenschaftlichen Instrument zur Beurteilung von Hörverlust gerecht zu werden.

Von Anfang an war es unsere Mission, genaue und benutzerfreundliche Hörtests zu entwickeln. Geräte, die die Früherkennung von Hörverlust unterstützen und die Lebensqualität weltweit verbessern.

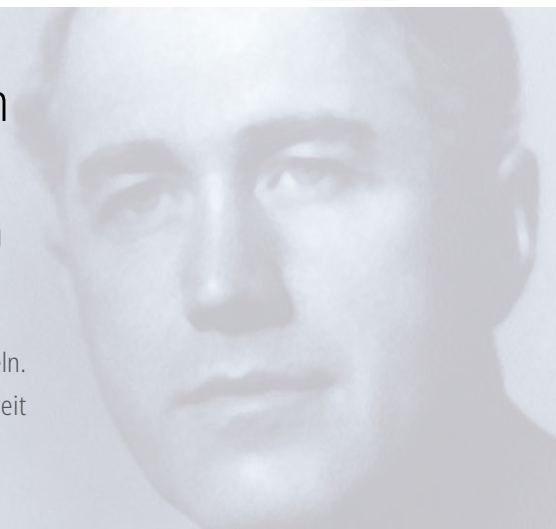

Anwendungen

Kindervorsorgeuntersuchungen

Das Reintonaudiometrie-Screening gilt weltweit als Goldstandard für Kinder ab drei Jahren. Kinderkliniken sowie Bildungseinrichtungen von der Vorschule bis zur Hochschule sind ideale Umgebungen für regelmäßige Hörscreenings. Durch die regelmäßige Durchführung dieser Tests können Hörbeeinträchtigungen frühzeitig erkannt werden, sodass jedes Kind die besten Chancen hat, rechtzeitig Unterstützung zu erhalten und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Mit dem MA 25 / MA 27 können Fachleute in jeder Umgebung präzise und effiziente Screenings durchführen.

- ➡ Schuluntersuchungen
- ➡ Kinderarzt



Screening bei Erwachsenen

Das MA 25 und das MA 27 bieten zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Screening-Anwendungen. Sie wurden für Genauigkeit und Mobilität entwickelt und ermöglichen Fachleuten eine effiziente und einfache Durchführung von Hörtests vor Ort. Eine umfassende Palette von Testoptionen, darunter der automatisierte Hughson-Westlake-Test, gewährleistet Flexibilität und nahtlose Integration in jeden Arbeitsablauf. Die frühzeitige Erkennung von Hörverlust fördert die Kommunikation, die soziale Teilhabe und das allgemeine Wohlbefinden.

- ➡ Hörgeräteakustiker
- ➡ Arbeitsmedizin
- ➡ HNO / Kliniken



MA 25 / MA 27 – Funktionen & Benefits

Präzise und zuverlässige Technik

Da sie tragbar sind, wurden MA 25 und MA 27 so konstruiert, dass sie robust und zuverlässig sind. Nehmen Sie das Audiometer bedenkenlos überallhin mit. Benutzerfreundliche Drehknöpfe machen die Einstellung von Frequenz und Hörpegel einfach und bequem!

Zuverlässige Leistung für alle Screening-Anforderungen

Die Modelle MA 25 und MA 27 sind ideal für Luftleitungstests geeignet. Sie entsprechen den Normen IEC 60645-1 Typ 4/ ANSI S3.6, Typ 4 und gewährleisten zuverlässige und präzise Testergebnisse.

Umfassende Testoptionen

Das MA 25 und das MA 27 bieten eine umfassende Palette an Testmöglichkeiten. Die Frequenzen reichen von 125 Hz bis 8000 Hz und die Signalintensitäten von -10 dB HL bis 100 dB HL. Reine Töne und Warble-Töne (gepulst und kontinuierlich) runden das Angebot ab.

Erweiterte Funktionalität

Profitieren Sie von noch mehr Funktionen, indem Sie sich für die erweiterte Version 25e / 27e entscheiden. Das Upgrade umfasst einen automatischen Test nach Hughson-Westlake, und die Parameter lassen sich ganz einfach an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Darüber hinaus erleichtert die Talk-Forward-Funktion die Arbeit mit dem Gerät, insbesondere in Hörprüfkabinen.

MA 25

Schlankes und kompaktes Design

Das superleichte MA 25 wiegt nur 980g. Es ist so klein, dass es in Ihre Handfläche passt! In seiner Tragetasche verstaut, ist das MA 25 eines unserer kleinsten und leichtesten tragbaren Geräte. Es wird mit 3 AABatterien oder über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen.



MA 27

Einfach zu transportieren

Das stabile und dennoch leichte Gehäuse mit integriertem Griff und Aufbewahrungsfach schützt nicht nur das Audiometer, sondern ermöglicht Ihnen auch einen einfachen Transport. Es gibt reichlich Stauraum für Kopfhörer und anderes Zubehör.



MA 25 / MA 27 – Funktionen & Benefits

Optionen zur Datenverwaltung

Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode zur Datenverwaltung. Entweder die klassische Weise auf dem Audiogramm-Block oder über eine PC-Verbindung mit unseren Versionen MA 25e und MA 27e.

Kompatibel zur PC-Software Sessions: Machen Sie sich bereit für eine schnelle Datenübertragung!

Die MA 25e und MA 27e lassen sich nahtlos mit MAICO Sessions, unserer intuitiven Datenübertragungssoftware, verbinden. Dies ermöglicht eine einfache Verwaltung und übersichtliche Visualisierung der Audiometrieergebnisse, unabhängig davon, ob Sie schnelle PDF-Berichte erstellen oder Daten direkt in der Datenbank speichern. Für zusätzliche Flexibilität können die Ergebnisse auch als XML-Dateien exportiert werden, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.



Geräte	MA 25	MA 25e	MA 27	MA 27e
Audiometrie				
125 Hz bis 8000 Hz (11 Frequenzen)	✓	✓	✓	✓
Testsignale von -10 bis 100 dB HL	✓	✓	✓	✓
Reintöne + Warbletöne (impulsförmig und kontinuierlich)	✓	✓	✓	✓
Spezielle Tests				
Automatisierter Hughson-Westlake-Test		✓		✓
Software				
MAICO Sessions PC-Software		✓		✓
Zubehör und Funktionen				
Kopfhörer DD45	✓	✓	✓	✓
Kopfhörer DD65 v2	optional	optional	optional	optional
Patientenantworttaste	optional	✓	optional	✓
Stromversorgung	3 x AA-Batterien oder Netzteil	3 x AA-Batterien oder Netzteil	✓	✓
USB-Kabel		✓		✓
Tragetasche	optional	optional	optional	optional
eingebaute Talk-Forward-Funktion		✓		✓
Integriertes Aufbewahrungsfach			✓	✓

Komponenten und Zubehör variieren je nach Region und Konfiguration.

MA 25 / MA 27 – Komponenten, Zubehör und Software



MA 25 Gerät



MA 27 Gerät



LL-Kopfhörer DD45



LL-Kopfhörer
DD65 v2



Audiogrammblock




Patienten-
antworttaste



Tragetasche für das
MA 25



MAICO Sessions
PC-Software

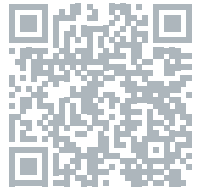

Sehen Sie sich
unser MA 25 /
MA 27 Video mit
schnellen Tipps an.

Komponenten und Zubehör variieren je nach Region und Konfiguration.

Erfahren Sie mehr über andere MAICO-Lösungen

easyTone



Schnelle und einfache
Tablet-Audiometrie

MA 28

LL- & KL-Audiometrie
für unterwegs



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Deutschland
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Finden Sie den für Sie zuständigen Händler.



10/2025