



MA 28

LL & KL Audiometrie wird mobil

MA 28 – Ein tragbares Screening-Audiometer mit LL und KL

Das MA 28 ist für Luft- und Knochenleitungsmessungen geeignet und damit das ideale Gerät für Hörtests – egal, ob in der Praxis oder vor Ort. Das MA 28 ist tragbar und daher leicht und robust konstruiert. Der integrierte Griff und das Staufach erleichtern den Transport und schützen gleichzeitig das gesamte für Hörtests erforderliche Zubehör. Das MA 28 entspricht den Normen IEC 60645-1, Typ 3/ ANSI S3.6, Typ 3 und gewährleistet zuverlässige und präzise Testergebnisse.

MA 28 auf einen Blick

- Luft- und Knochenleitungsaudiometrie
- Kompakt und tragbar mit integriertem Griff und Staufach
- Großes Farbdisplay für einfache Bedienung
- Automatisierte Hughson-Westlake-Funktion enthalten
- Interne Datenbank speichert 500 Patienten (3500 Tests)
- Optionaler Thermodrucker
- Optionale MAICO Sessions PC-Software




Gegründet, um Hörtest zu vereinfachen

MAICO Diagnostics wurde 1937 von Leland A. Watson gegründet, um dem wachsenden Bedarf der Ärzte an einem zuverlässigen, wissenschaftlichen Instrument zur Beurteilung von Hörverlust gerecht zu werden.

Von Anfang an war es unsere Mission, präzise und benutzerfreundliche Hörgeräte zu entwickeln, sowie Testgeräte, die die Früherkennung von Hörverlust unterstützen und die Lebensqualität weltweit verbessern.



Anwendungsgebiete

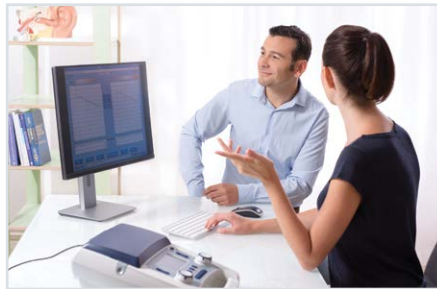

Audiologie / HNO / Kliniken

Die Reintonaudiometrie ist wichtig für die Erkennung von Hörverlust sowohl bei kleinen Kindern als auch bei Erwachsenen. Das MA 28 erleichtert die Untersuchung aller Altersgruppen, da Ärzte dicht neben dem Patienten sitzen können, wodurch eine angenehme Umgebung geschaffen wird, und sowohl Luft- als auch Knochenleitungsmessungen unterstützt werden. Dies ermöglicht eine genaue Diagnose von konduktivem und sensorineurealem Hörverlust für frühzeitige Maßnahmen. Die rechtzeitige Behandlung von Hörproblemen unterstützt die gesunde Entwicklung von Kindern und hilft älteren Erwachsenen, ihre Kommunikationsfähigkeit, soziale Kontakte und Lebensqualität zu erhalten, während gleichzeitig das Risiko von Isolation, kognitivem Verfall und Demenz verringert wird.

Arbeitsmedizin

Die frühzeitige Erkennung von Hörverlust ist für Mitarbeiter, die in lauten Umgebungen arbeiten, von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Hörscreenings im Rahmen von arbeitsmedizinischen Programmen tragen dazu bei, dauerhafte Schäden zu vermeiden und das Wohlbefinden der Belegschaft zu gewährleisten. Mit dem MA 28 können Fachleute vor Ort zuverlässige, konsistente und effiziente Hörtests durchführen – dies unterstützt rechtzeitige Maßnahmen, eine effektive Überwachung der Hörgesundheit und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz.



MA 28 – Funktionen & Benefits



Eine umfassende Auswahl an Reintönen

Das MA 28 ist für LL- und KL-Messungen geeignet und Ihr idealer Begleiter für Hörtests im gesamten Standardfrequenzbereich. Mit mehreren Stimulusoptionen und Maskierung auf Knopfdruck erfüllt das MA28 die Anforderungen jedes Untersuchers. Die Signalintensitäten reichen von -10 dB HL bis 110 dB HL für die Luftleitung und von -10 bis 80 dB HL für die Knochenleitung.


ID:	22.07.2025 11:20:18										
Name:	Patient 2										
Frequency	125	250	500	750	1k	1.5k	2k	3k	4k	6k	8k
Right - Air											
Right - Mask Air											
Right - Bone											
Right - Mask Bone											
Left - Air			25	30	35	40	45	50	55	55	NR
Left - Mask Air			15	20	25	30	35	40	45	45	45
Left - Bone											
Left - Mask Bone											
Back Tone HU Print											

Back

Tone

HW

Print

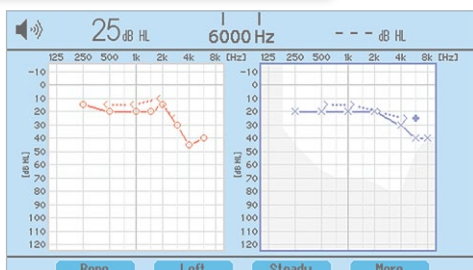

Audiometrie zum Mitnehmen


Mit dem MA 28 sind Sie überall bestens ausgestattet – funktional und praxisingerecht. Das leichte Gehäuse mit integriertem Griff und Staftuch wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und schützt das MA 28 und sein Zubehör unterwegs – eine zusätzliche Tasche ist nicht erforderlich.



Tradition trifft auf Moderne

Ein großes LED-Farbdisplay und klassische Bedienknöpfe machen die Einstellung von Frequenz und Hörpegel einfach und komfortabel – alles, was Sie während des Tests tun, fühlt sich schnell und intuitiv an. Wählen Sie zwischen Audiogramm-, Tabellen- oder numerischer Anzeige – je nachdem, was am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

MA 28 – Funktionen & Benefits

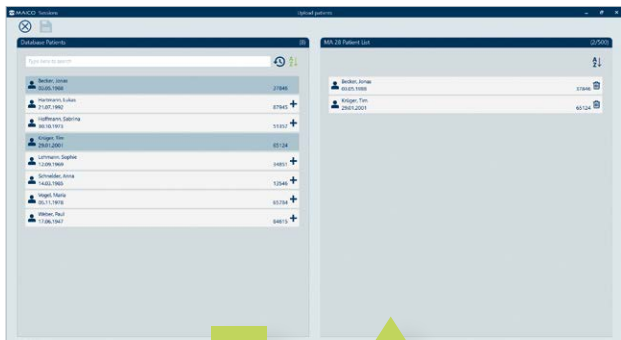

An Ihren Arbeitsablauf angepaßt

Mit einer Reihe von Einstellungsmöglichkeiten lässt sich das MA 28 leicht an individuelle Testmethoden anpassen. Einstellbare Parameter unterstützen maßgeschneiderte Protokolle, schnellere Übergänge verkürzen die Testzeit und die selektive Frequenzsteuerung sorgt für einen fokussierten Testablauf – für eine reibungslose und effiziente Erfahrung.

Interne Datenbank

Das MA 28 verfügt über eine interne Datenbank, in der bis zu 500 Patientenakten gespeichert werden können, was Ihren Arbeitsablauf optimiert. So können Sie direkt vom Gerät aus auf die Patientenergebnisse zugreifen und müssen diese nur selten extern abrufen. Bei Bedarf können die gespeicherten Ergebnisse einfach in die MAICO Sessions-Software übertragen oder mit dem Thermodrucker ausgedruckt werden.

Datenmanagement

Flexible Dokumentation der Ergebnisse mit dem MA 28: Wählen Sie zwischen einem 3-Zoll-Thermodrucker, der sich einfach anschließen lässt und mit dem Sie die Ergebnisse am Ende der Untersuchung direkt ausdrucken können, oder übertragen Sie die Ergebnisse in unsere intuitive Softwarelösung MAICO Sessions. MAICO Sessions ermöglicht die einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer audiometrischen Messungen. Schließen Sie das Gerät an Ihren PC an, um schnell einen PDF-Bericht zu erstellen, oder exportieren Sie XML-Dateien, um Ihren Arbeitsablauf mit dem MA 28 zu vereinfachen.



MA 28 – Komponenten, Zubehör und Software



MA 28-Gerät




LL-Kopfhörer DD45



KL-Kopfhörer B71
oder B81



LL-Kopfhörer
DD65 v2

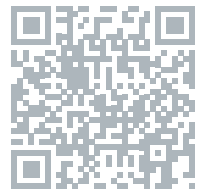

Sehen Sie sich
unsere videos an.



Patienten-
antworttaste



Thermodrucker
HM-E300




Audiogramm-Block



MAICO Sessions
PC-Software

Komponenten und Zubehör variieren je nach Region und Konfiguration.

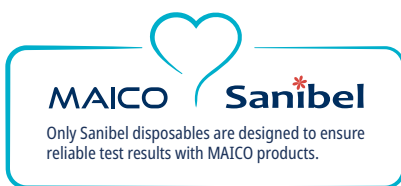

Erfahren Sie mehr über andere MAICO-Lösungen

MA 42



Diagnostisches
Zweikanal-Audiometer

touchTymp



Intuitive Touchscreen-Tympanometrie
mit erweiterten Testfunktionen



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Deutschland
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Finden Sie den nächstgelegenen Händler.



07/2025