

Tamizaje auditivo para todas las edades



# easyScreen

El nombre lo dice todo

## Prueba de audición ABR + EOA combinados para recién nacidos

easyScreen está diseñado para aligerar su carga de trabajo diaria de todas las formas posibles: cabe en su bolsillo, es ligero y le ofrece resultados precisos en segundos. Su pantalla resistiva de 4,3" le permite trabajar con guantes médicos e iniciar una prueba con tan solo 3 clics.



## Las pruebas de la audición en recién nacidos nunca han sido tan sencillas

El easyScreen es perfecto para el uso en hospitales, y es rápido, fácil de manejar y viene con orientación en pantalla. Incluso las personas que lo usan por primera vez logran los resultados más precisos con la ayuda de easyScreen. El dispositivo le recuerda todos los pasos importantes antes de la prueba y le informa si algo interfiere con las condiciones de la prueba a fin de lograr resultados correctos.

**easyScreen**  
*Nuestra primera elección  
para los programas  
de pruebas de audición en recién nacidos*



La elección es suya



Benefíciense de la máxima flexibilidad – nuestro dispositivo puede ser configurado para satisfacer sus necesidades. Elija la combinación ideal de ABR

- con nuestro BERAprone especial;
- y/o auriculares de inserción con o sin almohadillas EarCup™ para niños incluido la sonda EOA opcional para la prueba TEOAE y/o DPOAE.



## BERAphone® – Haga pruebas de manera inteligente



Es muy fácil ahorrar costos en las pruebas ABR con BERAphone®. Los electrodos reutilizables y el transductor están integrados en el dispositivo, de modo que no requiere elementos desechables. El electrodo frontal puede ser rotado o remplazado con uno más largo para cabezas de bebé más pequeñas – un tamaño perfecto para cada bebé. La detección de caída del electrodo y los indicadores del estado LED facilitan la obtención de resultados fiables, permitiéndole enfocarse más en el bebé. Solo conecte el easyScreen BERAphone® y podrá realizar la prueba de inmediato.

Además de la forma oval estándar, hay una almohadilla redonda para realizar la prueba en las cabezas más grandes.



Los electrodos con resorte se adaptan suavemente a la forma de cualquier cabeza



LEDs de color muestran el oído de prueba seleccionado, así como también la impedancia e información sobre el estado de la prueba.

Un botón en el BERAphone® le permite iniciar la prueba justo allí donde se encuentre: al lado del bebé.

## Potente prueba ABR automatizada para obtener resultados precisos

easyScreen usa nuestro estímulo único CE-Chirp® y un potente algoritmo de detección. Juntos, le permiten obtener resultados precisos “aprobar” o “remitir” en segundos.

El estímulo patentado CE-Chirp® estimula todas las regiones de la cóclea al mismo tiempo y genera así una respuesta mucho mayor para unos resultados más rápidos que un estímulo de clic estándar. Esto permite obtener resultados más fiables en condiciones normales en el nido.



## Completa flexibilidad de los métodos de prueba

Las pruebas ABR automáticas con el MAICO easyScreen pueden además realizarse usando los auriculares de inserción o almohadillas EarCup™ para niños de Sanibel con electrodos de presión. EarCup™ es una almohadilla auricular externa desechable de alta calidad y de bajo costo, ideal para las pruebas auditivas binaurales en recién nacidos. El diseño ayuda a reducir los efectos de ruido ambiental durante la prueba.

Con el BERAPhone® y las EarCup™ tiene completa flexibilidad para elegir cómo realizar cada prueba y puede acomodar las preferencias de cada examinador de manera perfecta.



## TEOAE y DPOAE opcional para la prueba de dos pasos

El easyScreen está disponible con DPOAE y/o TEOAE opcional para satisfacer sus necesidades individuales para cada prueba. Con ABR y EOA automatizados en un solo dispositivo, easyScreen ofrece una solución económica para los programas de prueba de dos etapas.

La sonda SnapPROBE™ de su easyScreen garantiza los mejores resultados de prueba y al mismo tiempo ofrece comodidad para el bebé: es extremadamente ligera y se adapta fácilmente incluso a los oídos más pequeños. Con las nuevas almohadillas tri-lumen Sanibel™, las puntas de las sondas ya no son necesarias. Simplemente inserte la almohadilla en el cuerpo de la sonda. Gracias al diseño simétrico la almohadilla encontrará fácilmente su camino en los tres canales de la sonda. La sonda está protegida por protectores de cera reemplazables, como los que se utilizan habitualmente en la tecnología de las audióprótesis. Al desechar la almohadilla que entró en contacto con el paciente, se evita la infección cruzada y se reduce notablemente el esfuerzo de limpieza.

Recomendamos el uso solo de productos consumibles de Sanibel Supply para garantizar mayor comodidad y resultados óptimos.



## Software intuitivo para una gestión de datos sencilla

Ahorre tiempo al usar la base de carga del easyScreen para la carga inalámbrica. Conecte el dispositivo a su computadora y ya está listo para la exportación de datos. Inicie la exportación con algunos clics y almacene, vea y gestione los datos del paciente directamente en el software opcional dedicado HearSIM™.



HearSIM™ es tan intuitivo como easyScreen. Usted puede imprimir los resultados de prueba desde su computadora o directamente desde el easyScreen sobre la marcha. easyScreen, ¡su nombre lo dice todo!



## Listo para salir – permanezca móvil con nuestro carro para el easyScreen

Todas las partes y accesorios de su easyScreen BERAPhone® están bien ordenados en nuestro carro opcional, donde quedan siempre a su alcance. La mejor manera de llevar su equipo con usted a cualquier parte.



## easyScreen – Componentes, Accesorios & Software



Dispositivo  
easyScreen



BERAphone®  
con base



Preamplificador ABR



Auriculares de  
inserción IP30



Sonda EOA  
SnapPROBE™



Estuche de  
transporte




Cables conductores  
de los electrodos



Impresora de  
etiquetas HM-E200



easyCart

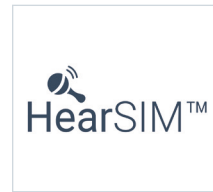

HearSIM™

Los componentes y accesorios varían según la región y la configuración.


## Consumibles



Electrodos



EarCup™

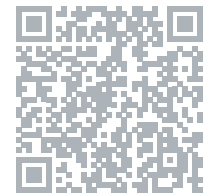

Vea nuestros  
videos sobre  
easyScreen

Sanibel® Supply es el distribuidor exclusivo de consumibles MAICO easyScreen. Utilice únicamente consumibles Sanibel® para obtener resultados óptimos en las pruebas.



**MAICO Diagnostics GmbH**

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Alemania

Tel.: +49 30 / 70 71 46-50

sales@maico.biz · www.maico.biz



07/2025