

Tamizaje auditivo para todas las edades



easyTymp

Timpanómetro portátil

easyTymp – Timpanómetro portátil

Rápido, portátil y con un sencillo funcionamiento mediante pantalla táctil, nuestro dispositivo portátil easyTymp realiza pruebas precisas de timpanometría y reflejos ipsilaterales en cuestión de segundos. easyTymp no solo es rápido, sino que también facilita el proceso de tamizaje a todos los profesionales para ayudar en el diagnóstico de patologías del oído medio de forma objetiva. Conforme con las normas IEC 60645-5 Tipo 2 y ANSI S3.39 Tipo 3, easyTymp garantiza resultados fiables y precisos.

Características Generales

- Mediciones rápidas y fiables del oído medio
- Simplicidad con interfaz de pantalla táctil
- Diseño compacto
- Tono de sonda de 226 Hz, tono de sonda de alta frecuencia opcional de 1 kHz
- Frecuencias de reflejo ipsilateral 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
- Resultados claros de Aprobado / Remitir
- Inicio automático para facilitar el funcionamiento
- Memoria interna con capacidad para almacenar hasta 50 pacientes
- Impresora térmica inalámbrica opcional
- Base opcional para carga y transferencia de datos al PC
- Software opcional MAICO Sessions para PC para facilitar la gestión de datos



Fundada para facilitar el tamizaje auditivo

MAICO Diagnostics GmbH, fundada en 1937 por Leland A. Watson, se creó para satisfacer la creciente necesidad de los médicos de disponer de una herramienta científica fiable para evaluar la pérdida auditiva.

Desde el principio, nuestra misión ha sido crear dispositivos para pruebas auditivas precisos y fáciles de usar que permitan la detección precoz de la pérdida auditiva y mejoren la calidad de vida en todo el mundo.



easyTymp – Tamizaje auditivo para todas las edades

Aplicaciones

Pediatría, medicina familiar y atención de urgencias

La evaluación de la función del oído medio es una parte fundamental de la atención pediátrica, la medicina familiar y la atención de urgencia, especialmente en el caso de afecciones comunes como la otitis media, que puede afectar a la audición y al desarrollo. easyTymp ofrece una evaluación rápida y objetiva del oído medio, lo que facilita la integración de la timpanometría en los flujos de trabajo clínicos rutinarios. Las mediciones automáticas comienzan al colocarlo en el oído, lo que proporciona resultados fiables en cuestión de segundos. Con un tono de sonda de 226 Hz y un tono opcional de 1 kHz para pruebas en bebés, easyTymp permite una monitorización eficiente, una detección más temprana y una toma de decisiones clínicas informada.

Clínicas de otorrinolaringología y audiología

easyTymp completa su batería de pruebas, optimizando los flujos de trabajo y respaldando decisiones clínicas seguras. Su diseño portátil lo hace flexible para usar en movimiento y fácil de depositar con su base. La timpanometría se puede completar fácil y rápidamente en la sala de examen para un diagnóstico más rápido. La prueba se inicia automáticamente cuando se coloca la sonda en el oído, proporcionando mediciones fiables del oído medio en cuestión de segundos. Diseñado para pacientes de todas las edades, easyTymp incluye un tono de sonda de 226 Hz, un tono opcional de 1 kHz para bebés y pruebas de reflejos en frecuencias clave. Con una pantalla de alta resolución y una interfaz intuitiva, se adapta fácilmente a cualquier entorno clínico.

Distribuidores de audioprótesis

La evaluación rápida y objetiva del oído medio es un paso fundamental para obtener resultados precisos en la evaluación auditiva. easyTymp proporciona información fiable sobre la función del oído medio, lo que ayuda a identificar afecciones que pueden influir en los resultados audiométricos y afectar a la precisión de la adaptación de los audífonos. Su diseño portátil ofrece flexibilidad en cualquier entorno y proporciona resultados en cuestión de segundos. Diseñado para ofrecer rapidez y fiabilidad, easyTymp aporta mayor confianza a cada sesión.

easyTym – Funciones y beneficios

Mediciones muy rápidas del oído medio

easyTym es el dispositivo portátil ideal para pruebas de tamizaje del oído medio. La prueba comienza automáticamente una vez que la sonda se coloca en el oído, y ofrece mediciones rápidas y fiables del oído medio en cuestión de segundos. Ideal para pacientes de todas las edades, easyTym incluye un tono de sonda de 226 Hz, un tono opcional de 1 kHz para bebés y pruebas de reflejos en frecuencias clave.

Resultados sencillos

El easyTym ofrece claridad inmediata a través de imágenes inteligentes. Los resultados «Aprobado»/«Remitir» se muestran claramente, junto con timpanogramas detallados, curvas de reflejos y datos numéricos en pantalla, lo que facilita la interpretación de los hallazgos, la explicación de los resultados y el mantenimiento del flujo de trabajo.

Pantalla táctil intuitiva y diseño compacto

easyTym combina una pantalla táctil intuitiva con un diseño compacto y portátil para que las pruebas del oído medio sean sencillas y eficientes. El rápido inicio de la prueba y el funcionamiento con una sola pulsación permiten acceder cómodamente a todas las funciones con una sola mano, mientras que la pantalla a todo color de alta resolución y el diseño optimizado garantizan una navegación fluida y un control preciso de la prueba. Diseñado con un tamaño reducido que ahorra espacio, su forma ligera y portátil se adapta fácilmente a la mano y encuentra espacio en mostradores abarrotados, lo que lo hace ideal para clínicas concurridas, entornos de atención móvil y espacios de trabajo compartidos. Fácil de almacenar, transportar y utilizar, easyTym ofrece practicidad diaria sin comprometer el rendimiento.



easyTymp – Funciones y beneficios


Base easyTymp

La base opcional de easyTymp sirve como base segura de carga y conectividad, lo que garantiza que el dispositivo se guarde de forma segura, y esté completamente cargado y listo para su uso en todo momento. También permite una conectividad perfecta con el ordenador para una gestión eficiente de los datos, lo que permite transferir los resultados de las pruebas de forma rápida y fiable.



Gestión de pacientes

Con una capacidad de memoria interna para hasta 50 pacientes, easyTymp almacena fácilmente los resultados de las pruebas para su posterior revisión y gestión. Ya sea en la clínica o en desplazamientos, este almacenamiento integrado ofrece la flexibilidad de realizar pruebas a lo largo del día sin necesidad de gestionar archivos entre sesiones, lo que garantiza que los resultados se guarden y estén disponibles cuando se necesiten.

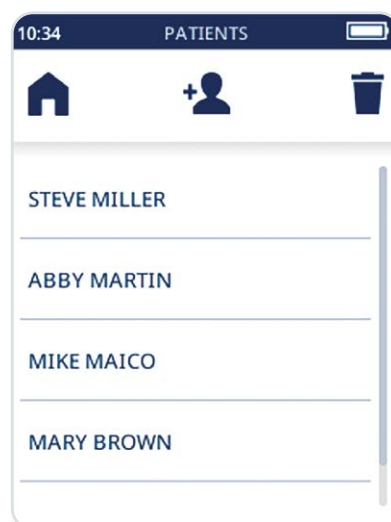

Gestión de datos

easyTymp ofrece opciones flexibles para documentar y gestionar los resultados de las pruebas. Elija una impresora térmica inalámbrica para obtener impresiones inmediatas al final de una sesión de pruebas, o utilice el intuitivo software MAICO Sessions para la gestión digital de datos. MAICO Sessions permite visualizar y organizar de forma eficiente las mediciones timpanométricas, con la generación rápida de informes en PDF o la exportación de archivos XML a través de una conexión con la computadora para agilizar su flujo de trabajo. El software puede funcionar como una solución independiente con una base de datos integrada, integrarse perfectamente con los sistemas EMR a través de opciones de interfaz dedicadas o conectarse con las bases de datos de pacientes OtoAccess® o NOAH.



easyTymp – Componentes, accesorios y software



Dispositivo
easyTymp



Base



Caja de tapones
para la sonda incl.
tapones



Cavidad de prueba



Impresora



Estuche de
transporte



Software para PC
MAICO Sessions

Los componentes y accesorios varían según la región y la configuración.

Más información de producto sobre otras soluciones de MAICO

easyTone



Rápido y sencillo
Audiometría con tableta

touchTymp



Timpanometría intuitiva
con pantalla táctil con pruebas avanzadas



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Alemania
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Encuentre su distribuidor local.



01/2026