



MA 28

Audiometria VA e VO portátil

MA 28 – Um audiômetro portátil com VA e VO

Capaz de realizar medições por condução aérea e óssea, o MA 28 é o dispositivo ideal para triagem auditiva, seja em consultórios ou em campo. O MA 28 é portátil e, portanto, projetado para ser leve e resistente. Sua alça integrada e compartimento de armazenamento facilitam ainda mais o transporte, protegendo todos os acessórios necessários para o teste auditivo. Em conformidade com a norma IEC 60645-1, Tipo 3/ ANSI S3.6, Tipo 3, o MA 28 garante resultados de teste confiáveis e precisos.

Características em resumo:


- Audiometria por condução aérea e óssea
- Compacto e portátil com alça e compartimento integrados
- Grande ecrã com cores para fácil operação
- Hughson-Westlake automatizado incluído
- Banco de dados interno com capacidade para 500 pacientes (3500 testes)
- Impressora térmica opcional
- Software MAICO Sessions para PC opcional




Founded to Make Hearing Screening Easier

MAICO Diagnostics, founded in 1937 by Leland A. Watson, was established to meet a growing need among doctors for a reliable, scientific tool to assess hearing loss.

From the beginning, our mission has been to create accurate, easy-to-use hearing test equipment that supports early detection of hearing loss and improves quality of life around the world.

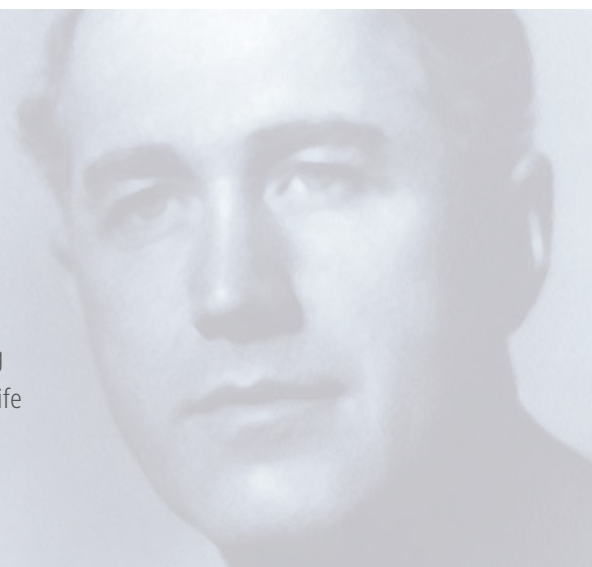

Aplicações

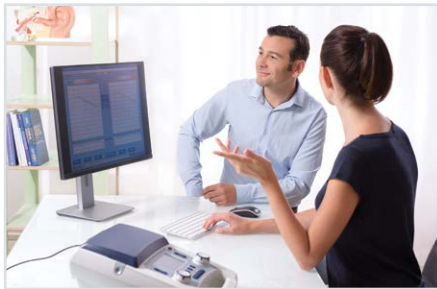

Audiologia / Otorrinolaringologia / Clínicas

A audiometria tonal pura é importante para detectar perda auditiva em diversas fases da vida. O MA 28 facilita os testes em todas as faixas etárias, permitindo que os profissionais se sentem perto do paciente, criando um ambiente confortável e oferecendo suporte para testes de condução aérea e óssea. Isso permite o diagnóstico preciso da perda auditiva condutiva versus neurosensorial para intervenção precoce. Tratar os problemas auditivos prontamente contribui para o desenvolvimento saudável das crianças e ajuda os adultos e os idosos a manterem a comunicação, as relações sociais e a qualidade de vida, além de reduzir o risco de isolamento, declínio cognitivo e demência.

Saúde ocupacional

A detecção precoce da perda auditiva é crucial para os funcionários que trabalham em ambientes ruidosos. Exames auditivos regulares dentro de programas de saúde ocupacional ajudam a prevenir danos permanentes e a proteger o bem-estar da força de trabalho. Com o MA 28, os profissionais podem realizar avaliações auditivas confiáveis, consistentes e eficientes no local, apoiando a intervenção precoce, o acompanhamento eficaz da saúde auditiva e garantindo a conformidade com as normas de segurança no local de trabalho.




MA 28 – Características e benefícios



Gama completa de opções de testes de tom puro

Capaz de realizar medições de VA e VO, o MA 28 é o seu companheiro ideal para testes auditivos com uma gama de frequência padrão completa. Com múltiplas opções de estímulo e mascaramento acessível ao toque de um botão, o MA28 pode atender às necessidades de qualquer profissional da saúde auditiva. As intensidades de sinal variam de -10 dBNA a 110 dBNA para condução aérea e de -10 a 80 dBNA para condução óssea.

ID:	22.07.2025 11:20:18														
Name:	Patient 2														
Frequency	125	250	500	750	1k	1.5k	2k	3k	4k	6k	8k				
Right - Air															
Right - Mask Air															
Right - Bone															
Right - Mask Bone															
Left - Air			25	30	35	40	45	50	55	55	NR				
Left - Mask Air			15	20	25	30	35	40	45	45	45				
Left - Bone															
Left - Mask Bone															

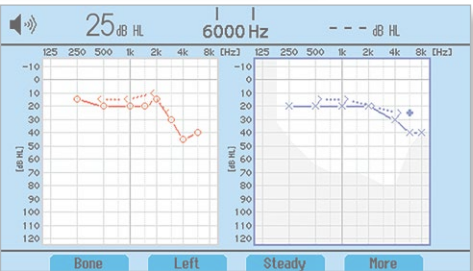

Audiometria em movimento


Leve o MA 28 para qualquer lugar com confiança e estilo. Projetado para ser portátil, o estojo leve com alça integrada e compartimento de armazenamento protege o MA 28 e seus acessórios durante o transporte – não é necessário um estojo extra.



A tradição encontra a tecnologia de ponta

Um grande display LED colorido e botões de controle clássicos tornam o ajuste da frequência e dos níveis de audição simples e confortável – tudo o que você faz durante o teste é rápido e intuitivo. Escolha entre audiograma, tabela ou display numérico – o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho.

MA 28 – Características e vantagens

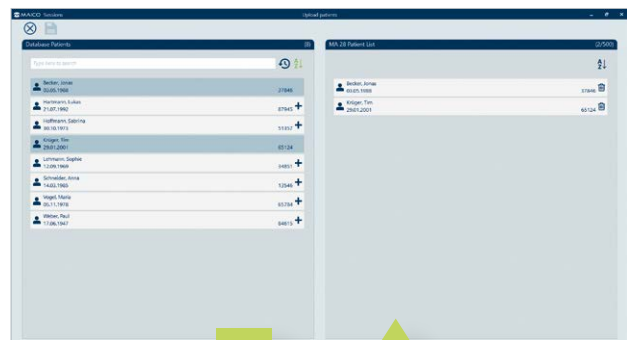

Adaptado ao seu fluxo de trabalho

Com uma variedade de configurações personalizáveis, o MA 28 adapta-se facilmente aos estilos de teste individuais. Os parâmetros ajustáveis suportam protocolos personalizados, as transições mais rápidas reduzem o tempo de teste e o controle seletivo de frequência mantém o teste focado, proporcionando uma experiência suave e eficiente.

Banco de dados interno

O MA 28 possui um banco de dados interno capaz de armazenar até 500 registros de pacientes, simplificando seu fluxo de trabalho. Isso permite acesso rápido aos resultados dos pacientes para análise diretamente no dispositivo, minimizando a necessidade de recuperação de dados externos. Quando necessário, os resultados armazenados podem ser facilmente transferidos para o software MAICO Sessions ou impressos usando a impressora térmica.

Gerenciamento de dados


A documentação dos resultados é flexível com o MA 28. Escolha entre usar uma impressora térmica de 3 polegadas, que se conecta facilmente e imprime os resultados no final de uma sessão de teste, ou nossa solução intuitiva de software de transferência de dados, MAICO Sessions. O MAICO Sessions permite o gerenciamento e a visualização fáceis de suas medições audiométricas. Conecte-se ao seu PC para obter um relatório rápido em PDF ou exportar arquivos XML, simplificando seu fluxo de trabalho com o MA 28.



MA 28 – Componentes, acessórios e software




Dispositivo MA 28

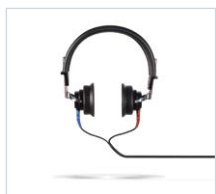


Fone de ouvido VA
DD45




Fone de ouvido VO
B71 ou B81

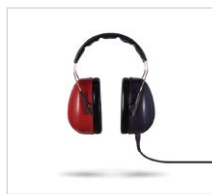

Fone de ouvido VO
DD65 v2

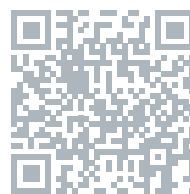

Assista aos nossos
vídeos sobre o
MA 28

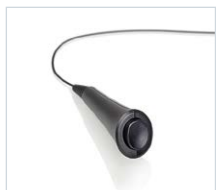

Interruptor de
resposta do paciente



Impressora térmica
HM-E300



Bloco para audio-
grama



Software MAICO
Sessions para PC

Os componentes e acessórios variam de acordo com a região e a configuração.



Saiba mais sobre outras soluções MAICO

MA 42



Audiômetro de diagnóstico
de dois canais

touchTymp



Timpametria intuitiva
com tela sensível ao toque



MAICO Diagnostics GmbH

Distribuidor exclusivo no Brasil: Diatec Diagnostics Brasil

Av. Rio Branco, 147/13º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Telef: (11) 3736-0835 · www.maico-diagnostics.com/br



07/2025